


Ваше
СЕРДЦЕ
забьётся
быстрее от
РАДОСТИ.

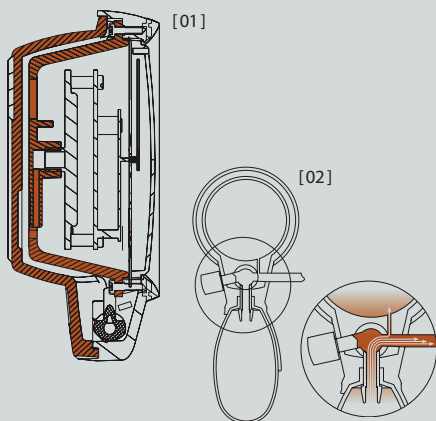

 SHOCKPROOF
**УДАРОПРОЧНОСТЬ**

[01] Ударопрочная конструкция с двойными стенками и уникальной защитой манометра. Надёжная конструкция с двойными стенками и уникальным тройным креплением манометра обеспечивает идеальную защиту от ударов. Соответствует требованиям европейского стандарта EN ISO 81060-1 и стандарта ANSI/AAMI/ ISO 81060-1.

СИСТЕМА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВОЗДУШНОГО ДАВЛЕНИЯ

[02] Конструкция с одной трубкой и инновационной системой распределения давления. Конструкция клапана обеспечивает идеальные условия давления, компенсируя скачки давления в воздушном потоке к манометру во время накачивания. До сих пор такой функционал был возможен только в системах с двумя трубками.



КЛИНИЧЕСКИ ОДОБРЕНО

HEINE GAMMA® G7

Модель из алюминиевого сплава с прецизионным клапаном



- ⋮ Ударопрочный.
- ⋮ Не содержит латекс.
- ⋮ Уникальная система измерения давления.
- ⋮ Манометр защищён от перегрузок. Гарантирует долговечность и надёжность.
- ⋮ Микрофильтр. Защищает клапан и манометр.
- ⋮ Шкала с большим диаметром. Черно-белая шкала диаметром 56 мм удобна для считывания показаний.
- ⋮ Качественная стрелка. Точно откалибрована, долговечна, устойчива к ударам.
- ⋮ Большая инсuffляционная груша. Объём груши увеличен на 50% для быстрого накачивания манжеты.
- ⋮ Уникальный клапан сброса воздуха. Обеспечивает плавную и точную регулировку скорости выпуска воздуха, быстрое сдутие манжеты и исключительную долговечность. Резиновый стопор предотвращает блокировку клапана.
- ⋮ Верхняя часть корпуса выполнена из алюминиевого сплава с амортизирующей накладкой, защищающей шкалу и стекло.
- ⋮ Нижняя часть корпуса из ударопрочного пластика с амортизирующим противоскользящим покрытием.
- ⋮ Легкосплавный регулируемый упор груши. Подходит для правой или левой руки.
- ⋮ Высококачественная манжета с одной трубкой и застёжкой-липучкой. Допускается стирка.
- ⋮ Эргономичный дизайн: модель G7 имеет идеальный баланс комфорта и простоты использования.

*гарантия 10 лет с даты покупки на отсутствие дефектов конструкции, материалов и качества изготовления.

GAMMA G7

В комплекте с манжетой для взрослых, в чехле на молнии	M-000.09.232
В комплекте с манжетой для детей, в чехле на молнии	M-000.09.233
Набор для практики с манжетами для детей, взрослых и малой манжетой для взрослых, в чехле на молнии	M-000.09.554
В комплекте с манжетой для взрослых, без чехла, коробка 10 шт.	M-000.09.560

HEINE GAMMA® G5

Стандартный сфигмоманометр HEINE



Имеет характеристики, аналогичные модели GAMMA G7, за исключением следующего:

- ⚡ Корпус выполнен из ударопрочного пластика с амортизирующим противоскользящим покрытием.
- ⚡ Регулируемый упор груши (пластиковый). Подходит для левой или правой руки.
- ⚡ 5 лет гарантии.*

*гарантия 5 лет с даты покупки на отсутствие дефектов конструкции, материалов и качества изготовления.

GAMMA G5

В комплекте с манжетой для взрослых, в чехле на молнии	M-000.09.230
В комплекте с манжетой для детей, в чехле на молнии	M-000.09.231
Набор для практики с манжетами для детей, взрослых и малой манжетой для взрослых, в чехле на молнии	M-000.09.555
В комплекте с манжетой для взрослых, без чехла, коробка 10 шт.	M-000.09.561

HEINE GAMMA® GP

Стандартный сфигмоманометр HEINE с кнопочным клапаном



Имеет характеристики, аналогичные модели GAMMA G5, но с кнопочным клапаном сброса давления.

- ⚡ **Инновационный кнопочный клапан.** Плавная и точная регулировка скорости выпуска воздуха, сверхбыстрое сдутие манжеты, практически неограниченный срок службы. Подходит как для правшей, так и для левшей.
- ⚡ 5 лет гарантии.*

* гарантия 5 лет с даты покупки на отсутствие дефектов конструкции, материалов и качества изготовления.

GAMMA GP

В комплекте с манжетой для взрослых, в чехле на молнии	M-000.09.242
В комплекте с манжетой для детей, в чехле на молнии	M-000.09.243
Набор для практики с манжетами для детей, взрослых и малой манжетой для взрослых, в чехле на молнии	M-000.09.556
В комплекте с манжетой для взрослых, без чехла, коробка 10 шт.	M-000.09.562



HEINE GAMMA® XXL LF

Профессиональная модель высшего качества



[01]

Поскольку модель GAMMA XXL LF не содержит ртути, она абсолютно безопасна для людей и окружающей среды.

- ⋄ Не содержит латекс.
- ⋄ Прочная конструкция из поликарбоната. Сохраняет работоспособность при интенсивном использовании в больнице или учебном заведении.
- ⋄ Шкала увеличенного диаметра 130 мм. Поворачивается под любым углом для удобного считывания показаний.
- ⋄ Длинная спиральная трубка (3 м) позволяет увеличить рабочее расстояние.
- ⋄ Высококачественная стрелка. Точно откалибрована и долговечна.
- ⋄ Прецизионный воздушный клапан. Плавная и точная регулировка сброса давления.
- ⋄ Не требующий обслуживания, точный и долговечный манометр.
- ⋄ Не содержит ртути. Безопасен для окружающей среды.
- ⋄ Установка на столе, на стене, на рельсе, на передвижном штативе с регулируемой высотой.
- ⋄ 10 лет гарантии.*


*гарантия 10 лет с даты покупки на отсутствие дефектов конструкции, материалов и качества изготовления.

GAMMA XXL LF

LF-W — настенный с манжетой для взрослых [01]	M-000.09.323
LF-S — на передвижном штативе с манжетой для взрослых [02]	M-000.09.326
LF-R — на рельсе с манжетой для взрослых [03]	M-000.09.325
LF-T — настольный (с неспиральной трубкой) с манжетой для взрослых [04]	M-000.09.322
GAMMA XXL LF-WB — для монтажной панели, см. стр. 146 [05]	M-000.09.327

Принадлежности

Держатель манжеты для GAMMA XXL LF-T	M-000.09.141
Настольная подставка для GAMMA XXL LF-T	M-000.09.142
Регулируемый передвижной штатив для GAMMA XXL LF-S (высота от 80 до 125 см)	M-000.09.145
Универсальная крепёжная пластина для GAMMA XXL LF-W, -S, -R	M-000.09.306
Рельсовый зажим для GAMMA XXL LF-R	M-000.09.307

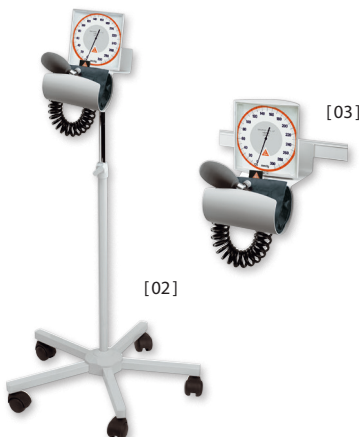

[02]



[03]



[04]



[05]

Манжеты и принадлежности

Безлатексные манжеты для измерения давления




Манжеты для сфигмоманометров GAMMA G7 / G5 / GP / XXL LF.

- ⋮ Не содержат латекс.
- ⋮ Подходят для большинства распространённых сфигмоманометров.
- ⋮ Высококачественные манжеты с застёжкой-липучкой из износостойкого материала. Выдержали физиологические испытания.
- ⋮ Двойная прошивка.
- ⋮ Допускается стирка.
- ⋮ Метка для правильной установки.
- ⋮ Чёткое обозначение размерного ряда и контрольная метка обхвата плеча.
- ⋮ Утолщенная, чрезвычайно гибкая трубка. Долгий срок службы.
- ⋮ Надёжность, подтверждённая испытаниями. Абсолютно герметичная система.

	GAMMA G7 / G5 / GP		Манжеты с одной трубкой (комплект) Размер Окружность, см	
	Младенцы [01]	6x28	8–13	M-000.09.700
Дети [02]	10x34	13–20	M-000.09.702	
Взрослые, малая [03]	14x53	20–29	M-000.09.704	
Взрослые [04]	14x58	29–41	M-000.09.619	
Взрослые, большая [05]	17x70	35–47	M-000.09.706	
Бедро [06]	20x86	41–59	M-000.09.615	

	GAMMA XXL LF		Манжеты с одной трубкой (комплект) Размер Окружность, см	
	Младенцы [01]	6x28	8–13	M-000.09.701
Дети [02]	10x34	13–20	M-000.09.703	
Взрослые, малая [03]	14x53	20–29	M-000.09.705	
Взрослые [04]	14x58	29–41	M-000.09.629	
Взрослые, большая [05]	17x70	35–47	M-000.09.631	
Бедро [06]	20x86	41–59	M-000.09.625	

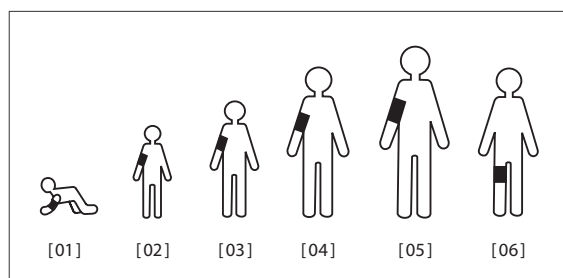



СТЕТОСКОПЫ HEINE GAMMA

- ∴ **Цельная головка** и идеальный вес исключают побочные шумы вследствие манипуляций и обеспечивают отличную передачу звука. Гигиеничное матовое хромированное покрытие.
- ∴ **Головка с «тёплым» ободком** для удобства пациента.
- ∴ **Эргономичные хромированные бинауральные трубки.** Возможность индивидуальной регулировки.
- ∴ **Высококачественная Y-образная трубка** обеспечивает идеальную акустику и передачу звука. Длина 56 см.
- ∴ **Безлатексные материалы.**

Стетоскоп HEINE GAMMA® 3.1 для измерения пульса

Прекрасные акустические характеристики



- ∴ **Стетоскоп с цельной плоской головкой.** Головка с лёгкостью помещается под манжету сфигмоманометра.
- ∴ **Высококачественная мембрана** диаметром 44 мм.
- ∴ **Конструкция с одной трубкой** и отличной передачей звука.
- ∴ **В комплект входят ушные оливы** (большие/мягкие) для звукоизоляции.
- ∴ **Дополнительно доступны:** ушные оливы (малые/жёсткие) (M-000.09.946).

Акустический стетоскоп HEINE GAMMA® 3.2

Превосходные акустические характеристики



Технические характеристики как у модели GAMMA 3.1, за исключением двусторонней головки.

- ∴ **Комбинированная двусторонняя головка** с двумя различными диапазонами частот: с одной стороны — высококачественная мембрана, с другой — коническая акустическая головка.
- ∴ **Высококачественная мембрана** диаметром 44 мм обеспечивает превосходные акустические характеристики и передачу звука.
- ∴ **Диаметр конуса 30 мм.**

GAMMA 3.2

M-000.09.942

Акустический стетоскоп HEINE GAMMA® 3.3

Для обследования детей



Технические характеристики как у модели GAMMA 3.2.

- ∴ **Уменьшенная область контакта** диаметром 31 мм делает модель GAMMA 3.3 идеальной для обследования детей.

Кардиологический стетоскоп HEINE GAMMA® C3

Разработан специально для кардиологии



- ∴ **Исключительные акустические характеристики**, особенно в диапазоне сердечных тонов.
- ∴ **Двусторонняя головка с двумя различными диапазонами частот:** с одной стороны двойная мембрана, с другой – коническая головка.
- ∴ **Двойная мембрана диаметром 45 мм** обеспечивает идеальное качество звука и превосходный контакт с кожей, гарантируя точную передачу звука..
- ∴ **Система «две трубки в одной»** улучшает рабочие характеристики. Эластичная, но устойчивая к сгибам система с исключительным качеством передачи звука.
- ∴ **В комплект входят ушные оливы** (большие/мягкие) и одна сменная пара (малые/жёсткие) для звукоизоляции.

Гарантия HEINE – лучшая гарантия на рынке!

HEINE предлагает Вам гарантию, которая отражает качество и надёжность нашей продукции. Все продукты соответствуют Европейской директиве 93/42 / ЕЕС или Правилам медицинского оборудования (MDR) относительно медицинских изделий и имеют европейский Знак Безопасности CE. Вся продукция HEINE, поставляемая в Российскую Федерацию, имеет регистрационное удостоверение Росздравнадзора.



Стандартная 5-летняя гарантия

Все изделия HEINE имеют гарантию в течение 5 лет от даты поставки с завода на любые неисправности по вине производителя и на отсутствие дефектов конструкции, материалов и изготовления. Гарантия не распространяется на износ, на одноразовые предметы и расходные материалы, а также на аккумуляторные батареи и стандартные принадлежности, такие как лампы, общедоступные кабели управления и питания и соответствующие штекеры. Для получения подробной информации посетите сайт www.heine.com.

Условия гарантии для отдельных продуктов:

Дерматоскоп HEINE iC1

HEINE предоставляет 5-летнюю гарантию только в том случае, если продукт был приобретён у авторизованного дилера и зарегистрирован в течение 6 месяцев с даты покупки. Для регистрации перейдите по ссылке www.heine.com/register. Гарантия распространяется на дефекты конструкции, материалов и изготовления. Эта гарантия не распространяется на аккумулятор и чехол для мобильного телефона.

Фиброоптические ларингоскопы HEINE

Клиники ларингоскопа имеют расширенную 10-летнюю гарантию на отсутствие дефектов материала, обработки и изготовления, для лезвий, изготовленных 01.01.2020 или позже или с серийным номером SN1105228000 или выше. Предоставляется 10-летняя гарантия того, что выходная мощность не упадёт ниже 1000 люкс даже после повторных циклов автоклавирования (из расчёта 4000 циклов при 134 °C/4 мин). Гарантия распространяется на лезвия ларингоскопа HEINE Classic+ после очистки, дезинфекции и/или стерилизации, в соответствии с инструкциями по переработке. На ларингоскопические лезвия HEINE Classic+ F.O., изготовленные до 01.01.2020, и на лезвия FlexTip+ распространяются те же условия гарантии, которые указаны выше, с 5-летним гарантийным периодом.

HEINE GAMMA G-series

На сфигмоманометры HEINE Gamma G7 и HEINE Gamma XXL LF распространяется расширенная гарантия – 10 лет на отсутствие дефектов материала, обработки и конструкции. Изнашиваемые детали и метрологический контроль не включены.

*HEINE Cube

На Cube HEINE предоставляется гарантия 2 года.

* Видеоларингоскоп HEINE visionPRO

На видеоларингоскоп HEINE visionPRO компания HEINE предоставляет 2-летнюю гарантию.

Гарантия HEINE – лучшая гарантия на рынке!

Уважаемые коллеги!

Мы, компания TTT HealthCare GmbH, Генеральный партнёр в России и других странах СНГ немецкой фирмы HEINE Optotechnik GmbH & Co. KG, просим Вас ознакомиться с условиями гарантии на диагностические инструменты и оборудование производства HEINE.

HEINE предлагает Вам гарантию, которая отражает качество и надёжность нашей продукции. Все продукты соответствуют Европейской директиве 93/42 / ЕЕС или Правилам медицинского оборудования (MDR) относительно медицинских изделий и имеют европейский Знак Безопасности CE.

Вся продукция HEINE, поставляемая в Российскую Федерацию, имеет регистрационное удостоверение Росздравнадзора.

Стандартная 5-летняя гарантия

Все изделия HEINE имеют гарантию в течение 5 лет от даты поставки с завода на любые неисправности по вине производителя и на отсутствие дефектов конструкции, материалов и изготовления. Гарантия не распространяется на износ, на одноразовые предметы и расходные материалы, а также на аккумуляторные батареи и стандартные принадлежности, такие как лампы, общедоступные кабели управления и питания и соответствующие штекеры.

Гарантия не распространяется на неисправности, возникшие по следующим причинам:

- эксплуатация с нарушением требований руководства по эксплуатации, либо небрежным обращением;
- механическими повреждениями медицинского изделия или его принадлежностей;
- включение в сеть с напряжением, отличным от указанного на изделии;
- разборка, не предусмотренная руководством по эксплуатации, или любое другое постороннее вмешательство в конструкцию изделия, в том числе ремонт, произведенный не уполномоченным на это персоналом;
- использование неоригинальных устройств и комплектующих, а также расходных материалов;
- проникновение жидкости, пыли и других посторонних предметов внутрь изделия, умышленная порча;
- повреждение изделия в результате пожара, наводнения, удара молнии и пр.

Каждый потребитель, любое государственное или частное ЛПУ, которое приобрело продукцию HEINE у авторизованного дистрибьютера, имеет право получить полную заводскую гарантию на 5 лет. Для получения гарантийного талона завода-изготовителя необходимо сообщить серийный номер и наименование приобретенного инструмента Генеральному партнёру HEINE в России и СНГ, в компанию TTT HealthCare GmbH: info@ttt-gmbh.com