



∴ **Серия HEINE GAMMA®**


Ударопрочные и безлатексные сфигмоманометры
и стетоскопы



Лучшие в своем классе

Те, кто предпочитает высочайшую точность диагностики, выбирает высокое качество


- Ударопрочный
- Корпус с двойными стенками
- Три варианта крепления манометра
- Превосходит все соответствующие стандарты

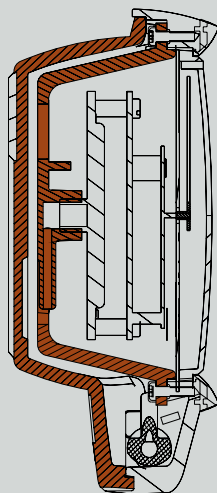

Корпус с двойными стенками и три варианта крепления манометра


Серия приборов GAMMA G имеет ударопрочную систему, которая защищает манометр и обеспечивает приборы непревзойденной прочностью. Серия приборов GAMMA G протестирована значительно больше европейского (EN1060) и американского (SP9) стандартов.

Тест на прочность. Высота в см.

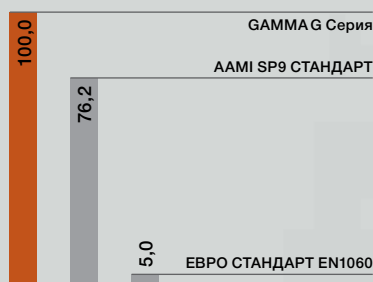

Дизайн «с одной трубкой» и эксклюзивной системой нагнетания воздуха

Эксклюзивная система нагнетания воздуха контролирует воздушный поток на манометр во время нагнетания, обеспечивая ровность и точность увеличения давления и долгий срок службы прибора. У серии GAMMA G сейчас те же характеристики, которые были доступны до этого только сфигмоманометрам «с двумя трубками».

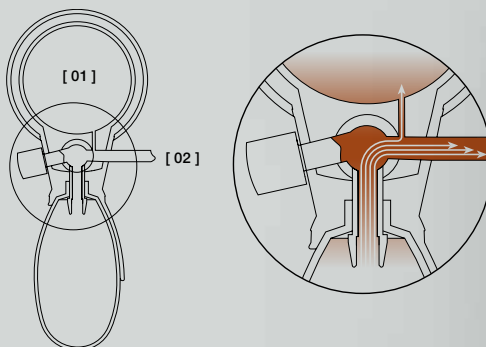

[01] МАНОМЕТР
[02] ТРУБКА ДО МАНЖЕТЫ

Новая серия инновационных, ударопрочных и безлатексных сфигмоманометров GAMMA G — это новый стандарт в исполнении, качестве и цене. Функциональный и модный дизайн в комбинации с высококачественным точным манометром и надежной конструкцией гарантирует надежную работу в течение многих лет в любых клинических условиях.

Серия GAMMA G/Подтверждение клинического одобрения:

Серия GAMMA G теперь клинически одобрена Европейским Союзом по гипертензии. Протокол аттестации для GAMMA G подтверждает долговременную точность измерения систолического и диастолического давления крови.



[HEINE GAMMA® G5]

GAMMA G5

Код для заказа:

Со взрослой манжетой	M-000.09.230
С детской манжетой	M-000.09.231
С детской, взрослой и большой манжетами	M-000.09.555
Со взрослой манжетой, без чехла, упаковка 10 шт	M-000.09.561

Стандартный сфигмоманометр HEINE

GAMMA G5 сочетает дизайн и качественные характеристики. Корпус спрессован из двух компонентов термопластика (Polyamide/TP Elastomer), поглощает удары и имеет противоскользящее покрытие.

Большую инфуляционную грушу легко держать в руках, что позволяет быстро нагнетать воздух в манжету.

- ⋮ **Без латекса**
- ⋮ **Ударопрочный**
- ⋮ **Эксклюзивная система нагнетания воздуха**
- ⋮ **Манометр, защищенный от избытка давления:**
Гарантия надежности и достоверности.
- ⋮ **Микрофильтр:** Защищает клапан и манометр.
- ⋮ **Шкала большого диаметра:**
(56 мм) удобна для просмотра.

- ⋮ **Большая инфуляционная груша:** Объем груши больше на 50 % для быстрого нагнетения воздуха в манжету.
- ⋮ **Эксклюзивный воздуховыпускающий клапан:** Обеспечивает точную регулировку выпускаемого воздуха, быстрый выпуск и долговечность. Резиновый стопор предотвращает блокировку клапана.
- ⋮ **Нижняя часть корпуса спрессована из двух компонентов термопластика (Polyamide/TP-Elastomer).** Поглощающая удары, с противоскользящим покрытием.
- ⋮ **Регулируемый упор (Polyamide/TP-Elastomer):** Для праворуких и леворуких.
- ⋮ **Качественная манжета с одной трубкой и застежкой «липучка».** Возможна стирка.
- ⋮ **5 лет гарантии*.**

*GAMMA G5 гарантирует отсутствие производственных дефектов.



[HEINE GAMMA® G7]

GAMMA G7

Код для заказа:

Со взрослой манжетой	M-000.09.232
С детской манжетой	M-000.09.233
С детской, взрослой и большой манжетами	M-000.09.554
Со взрослой манжетой, без чехла, упаковка 10 шт.	M-000.09.560

Корпус из алюминиевого сплава, высокоточный клапан

Сфигмоманометр GAMMA G7 уникален в своей конструкции. Корпус изготовлен из алюминиевого сплава и двух компонентов термопластика (Polyamide/TP-Elastomer), что производит ударопрочный и современный дизайн.

Сочетает в себе особенности дизайна и качества GAMMA G5, за исключением следующих моментов:

- ⋮ **Верх корпуса** сделан из алюминиевого сплава. Современный термопластик (Polyamide/TP-Elastomer) с поглощающим удары кольцом защищает индикатор и стекло.
- ⋮ **Нижняя часть корпуса** спрессована из двух компонентов термопластика (Polyamide/TP-Elastomer). Поглощает удары, с противоскользящим покрытием.
- ⋮ **Легкий сплав, регулируемый упор:**
Для праворуких и леворуких.
- ⋮ **10 лет гарантии*.**

*GAMMA G7 гарантирует отсутствие производственных дефектов.



[HEINE GAMMA® GP]

GAMMA GP | Код для заказа:

Со взрослой манжетой	M-000.09.242
С детской манжетой	M-000.09.243
С детской, взрослой и большой манжетами	M-000.09.556
Со взрослой манжетой, без чехла, упаковка 10 шт.	M-000.09.562

Стандартный сфигмоманометр со спусковой кнопкой

Сочетает дизайн и качественные характеристики сфигмоманометра GAMMA G5, но с воздухопускающим клапаном, выполненным в виде спусковой кнопки.

- **Иновационный воздухопускающий клапан — спусковая кнопка.** Обеспечивает точную регулировку выпускаемого воздуха, быстрое выкачивание и крайне высокую долговечность. Простота в обращении. Подходит для праворуких и леворуких.

- **5 лет гарантии*.**

*GAMMA GP гарантирует отсутствие производственных дефектов.



[HEINE GAMMA® XXL LF]

GAMMA XXL LF | Код для заказа:

GAMMA XXL LF-W, НАСТЕННЫЙ ВАРИАНТ	M-000.09.323
GAMMA XXL LF-S, МОБИЛЬНЫЙ ВАРИАНТ	M-000.09.326
GAMMA XXL LF-R, ВАРИАНТ КРЕПЛЕНИЯ НА РЕЛЬС	M-000.09.325
GAMMA XXL LF-T, НАСТОЛЬНЫЙ ВАРИАНТ (ПРЯМАЯ ИНСУФЛЯЦИОННАЯ ТРУБКА)	M-000.09.322

Универсальная профессиональная модель

Классическая модель HEINE GAMMA XXL LF теперь без латекса и имеет различные опции крепления, что делает сфигмоманометр идеальным инструментом в любых клинических условиях.

Регулируемая черно-белая шкала большого размера удобна для чтения даже на расстоянии.

Безртутный сфигмоманометр GAMMA XXL LF безопасен для людей и окружающей среды.

- **Без латекса**
- **Прочная поликарбоневая конструкция** обеспечивает бесперебойную работу даже при большой нагрузке в крупных госпиталях.
- **Черно-белая шкала большого диаметра 130 мм** удобна для чтения с любого угла.
- **Длинная спиральная инсуфляционная трубка (3 мм)** увеличивает рабочую дистанцию.
- **Высококачественный индикатор** точно откалиброван и надежен.
- **Воздуховыпускающий клапан** обеспечивает точную регулировку выпускаемого воздуха.
- **Манометр, защищенный от избытка давления:** Гарантия надежности и достоверности.
- **Различные варианты крепления: настенный, мобильный (регулировка высоты), на рельс и на стол.**
- **Безртутный**
- **10 лет гарантии*.**

*GAMMA XXL LF гарантирует отсутствие производственных дефектов.

[XXL LF-S]



[XXL LF-T]



[XXL LF-R]



[XXL LF-W]

[МАНЖЕТЫ/АКСЕССУАРЫ]

Манжеты с одной трубкой для GAMMA G7/G5/GP	Детский (малый)	6x28	M-000.09.700
	Детский	10x34	M-000.09.702
	Взрослый (малый)	14x53	M-000.09.704
	Взрослый	14x58	M-000.09.619
	Для бедра	20x86	M-000.09.615
Манжеты для GAMMA XXL LF	Детский (малый)	6x28	M-000.09.701
	Детский	10x34	M-000.09.703
	Взрослый (малый)	14x53	M-000.09.705
	Взрослый	14x58	M-000.09.629
	Для бедра	20x86	M-000.09.625
Аксессуары для крепления и детали для GAMMA XXL LF	Дежатель манжеты	Для настольного крепления GAMMA XXL LF-T	M-000.09.141
	Настольный стенд	Для настольного крепления GAMMA XXL LF-T	M-000.09.142
	Универсальная установочная пластина	Для настенного, мобильного крепления и на рельс GAMMA XXL LF-R/LF-W/LF-S	M-000.09.306
	Рельсовый зажим	GAMMA XXL LF-R	M-000.09.307
	Регулируемый стенд на колесах	GAMMA XXL LF-S	M-000.09.145



СТЕТОСКОПЫ HEINE GAMMA®

- ⋮ Стетоскопы HEINE серии GAMMA с **цельной головкой** и идеальным весом исключают побочные шумы вследствие манипуляций и обеспечивают отличную передачу звука. Гигиеническое покрытие стетоскопов матовое хромированное.
- ⋮ **Ободок не вызывает ощущения холода** для комфорта пациента.
- ⋮ Бинауральные хромированные металлические трубки имеют возможность индивидуальной настройки.
- ⋮ **Длина U-образной трубки** стетоскопов 56 см. Трубка обеспечивает идеальную акустику и воспроизведение звука.
- ⋮ Стетоскопы серии GAMMA **не содержат латекса**.

[HEINE GAMMA® 3.1 Пульсовый стетоскоп]

GAMMA 3.1 | Код для заказа:

M-000.09.941

Превосходная акустика

- ⋮ **Стетоскоп с цельной плоской головкой.** Головку легко можно разместить под манжетой сфигмоманометра.
- ⋮ **Высококачественная мембрана,** 44 мм в диаметре.

- ⋮ **Система с одной трубкой** обладает отличной передачей звука.
- ⋮ **Включает ушные оливы (большие/мягкие)** для звукоизоляции.
- ⋮ **Опция:** ушные оливы (маленькие/ жесткие) (M-000.09.946).



[HEINE GAMMA® 3.2 Акустический стетоскоп]

GAMMA 3.2 | Код для заказа:

M-000.09.942

Превосходная акустика

Технические характеристики, как у GAMMA 3.1, но с двойной головкой.

- ⋮ **Комбинированная двойная головка** с двумя различными диапазонами частот: высококачественная мембрана с одной стороны и коническая акустическая — с другой.

- ⋮ **Высококачественная мембрана,** диаметр 44 мм обеспечивает отличные акустические характеристики и звукопередачу.
- ⋮ **Диаметр конуса 30 мм.**



[HEINE GAMMA® 3.3 Акустический стетоскоп]

GAMMA 3.3 | Код для заказа:

M-000.09.943

Для обследования детей

Технические характеристики как у GAMMA 3.2.

- ⋮ Благодаря **меньшей контактной площади** (31 мм) GAMMA 3.3 идеально подходит для обследования детей.



[HEINE GAMMA® C3 Кардиологический стетоскоп]

GAMMA C3 | Код для заказа:

M-000.09.944

Разработан специально для кардиологии

- ⋮ **Исключительные акустические характеристики,** идеально передают звуки низкой частоты в кардиологии.
- ⋮ **Комбинированная двойная головка** с двумя различными диапазонами частот: высококачественная мембрана с одной стороны и коническая акустическая — с другой.

- ⋮ Идеальная звукопередача и превосходный контакт с кожей **высококачественной двойной мембраны** диаметром 45 мм обеспечивает исключительное качество звука.
- ⋮ **Система «две трубки в одной».** Конструкция с толстой внешней трубкой для исключения внешних шумов и улучшения звуковой передачи.
- ⋮ **Включает ушные оливы (большие/мягкие)** и одну сменную пару (маленькие/жесткие) для звукоизоляции.





Имя HEINE характеризует продукцию высочайшего качества!

Основанная в 1946 году семейная компания с богатыми традициями сегодня является лидером международного рынка, поставляющим полный ассортимент диагностических инструментов. Продукция HEINE соответствует всем международным стандартам (ISO/CE) и обладает превосходной точностью и эргономичным дизайном. Постоянные инвестиции в научные исследования и разработки позволили создать прочную и богатую технологическую базу, обеспечивающую высочайшее качество продукции. Более 500 сотрудников во всем мире вносят свой вклад в успех компании.

www.heine.com
www.ttt-gmbh.com

GERMANY

 HEINE Optotechnik GmbH & Co. KG
Kientalstr. 7, 82211 Herrsching
Tel. +49 (0) 81 52-38 0
Fax +49 (0) 81 52-3 82 02
E-Mail: info@heine.com

NORTH AMERICA

HEINE USA LTD.
10 Innovation Way, Dover, NH 03820
Tel. (603) 7 42-71 03
Fax (603) 7 42-72 17
Toll Free (800) 367-4872
E-Mail: service@heine-na.com

AUSTRALIA

HEINE AUSTRALIA PTY. LTD.
Unit 9, 98 Old Pittwater Road
P.O. Box 717 Brookvale 2100
New South Wales
Tel. +61 (0) 2-99 38 95 00
Fax +61 (0) 2-99 39 23 05
E-Mail: info@heine.com.au

SWITZERLAND

HEINE (Schweiz) AG
Tobelackerstr. 9
CH-8212 Neuhausen am Rheinflall
Tel. +41 (0) 52-6 72 22 66
Fax +41 (0) 52-6 72 63 77
E-Mail: heine-schweiz@schaffhausen.ch

CHГ

TTT HealthCare GmbH
Heimat 89
D-14165 Berlin, Germany
Tel.: +49 (0) 15115353792
Fax: +49 (0) 84724773
info@ttt-gmbh.com

Мы оставляем за собой право изменять спецификации без предварительного уведомления.

